

# UriSed-kyvetit

REF

URS-9961HU  
URS-9961-1  
URS-9971  
URS-9972  
URS-9974  
URS-9961CH-1  
URS-9971CH

## Käyttöohjeet

Käyttötarkoitus:

UriSed-kyvetit ovat kertakäyttöisiä polykarbonaatista valmistettuja näyteastioita, joita käytetään sentrifugoimattomien ihmiskehon virtsanäytteiden analysoimiseen UriSed-sedimenttianalysaattoreiden avulla. Se on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön laboratoriossa. Se on tarkoitettu in vitro -diagnostiseen käyttöön.

Testausperiaate:

UriSed-kyvetit ovat näyteastioita, joiden avulla virtsanestenäytteet voidaan analysoida mikroskoopilla.


Toimitussisältö:

600 kyvetiä 12 kyvetin pidikkeessä, joista kussakin on 50 kyvetiä

Materiaalit, jotka eivät kuulu toimitukseen:


- Yhteensopiva virtsasedimenttianalysaattori (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Yleiset laboratoriovarusteet

Kyvettien käyttö:

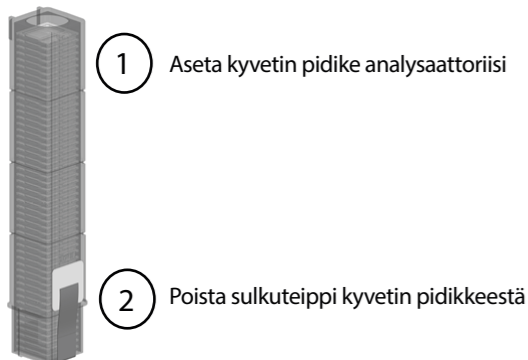


Ympäristöolosuhteet

Säilytyslämpötila	0 – 45°C
Kuljetuslämpötila	-25°C – 60°C
Kuljetuskosteus	20 – 80 %
Käyttöolosuhteet	Analysaattorin olosuhteiden mukaan

 Varoitukset ja huomautukset


- Älä säilytä kyvettejä suorassa auringonvalossa
- Älä poista sulkupeppiä kyvetin pidikkeestä ennen analysaattorin käyttöä
- Älä poista osittain täysiä kyvetin pidikkeitä analysaattoristasi
- Jokainen kyveti on kertakäyttöinen, älä koskaan suorita testiä käytetyillä kyvetillä
- Virtsa on ihmisperäistä nestettä, joten siinä on tartuntatautiin vaara, ja se voi aiheuttaa biologisen vaarank
- Käsittele UriSed-kyvettejä ja virtsan kontaminantteja varoen
- Hävitä jäte hyväksytyjen laboratorion ohjeiden ja menetelmien mukaisesti.
- Ota yhteys maahantuojaasi varmistaaksesi, että tilaamasi kyvetit ovat yhteensopivia analysaattorin kanssa
- Käytä kyvetit ennen viimeistä käyttöpäivämäärää

 Tarkista analysaattorin ohjeista tietoa näytteenotosta, mahdollisista valmisteluvaiheista, tulosten laskennasta, analyttisistä ja suorituskäytön ominaisuuksista, häiriöistä, rajoituksista, laadunvalvontamenetelmistä, erityisistä varoituksista ja huomautuksista.

Vaaratilanteista ilmoittaminen


Ilmoita kaikista vakavista vaaratilanteista, joita saattaa ilmetä tämän tuotteen käytön aikana, 77 Elektronika -huoltoedustajalle ja paikalliselle pätevälle viranomaisellesi.

Symbolit:

-  Yksilöllinen laitetunniste
-  In vitro -diagnostinen lääkinällinen laite
-  Luettelonumero
-  Eränumero
-  CE-merkintä vahvistaa, että laite täyttää Euroopan unionin sovellettavat direktiivit
-  Viimeinen käyttöajankohta
-  Lämpötilarajoitus
-  Valmistaja
-  Pidettävä suojassa auringonvalolta
-  Tutustu käyttöohjeisiin
-  Kosteusrajoitus
-  Varoitus
-  Biologisia vaaroja
-  600 Sisältö riittää 600 testiin
-  Ei SAA käyttää uudelleen
-  Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut
-  Suomen kieli
-  Tuotantoeränumero

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Muutokset
3	25.3.2022	IVDR-yhdenmukaisuuden päivitys
2	25.11.2020	Yleinen sisällön päivitys
1	17.2.2009	Ensimmäinen julkaisu

 Valmistaja:

77 Elektronika Kft.  
98. Fehérvári út, 1116 Budapest  
UNKARI  
www.en.e77.hu  
sales@e77.hu  
Puh.: + 36 1 206 - 1480  
Faksi: + 36 1 206 - 1481