

Kiuvetės „UriSed“

REF

URS-9961HU
URS-9961-1
URS-9971
URS-9972
URS-9974
URS-9961CH-1
URS-9971CH

Naudojimo instrukcijos

Paskirtis:

Kiuvetės „UriSed“ yra vienkartiniai mėginių indai iš polikarbonato, naudojami analizuoti necentrifuguotus žmogaus šlapimo mėginius nuosėdų analizatoriais „UriSed“. Jos skirtos profesionaliam naudojimui laboratorijose. Jos skirtos in vitro diagnostikai.

Tyrimo principas:

Kiuvetės „UriSed“ yra mėginių rinkimo indai, skirti mikroskopinei šlapimo analizei.


Pateiktos medžiagos:

600 kiuvečių 12 kiuvečių laikikliuose, kurių kiekviename yra 50 kiuvečių

Nepateiktos medžiagos:

- Suderinamas šlapimo nuosėdų analizatorius („UriSed“, „UriSed2“, „UriSed 3“, „UriSed 3 PRO“, „UriSed mini“)
- Bendroji laboratorinė įranga

Kiuvečių naudojimas:

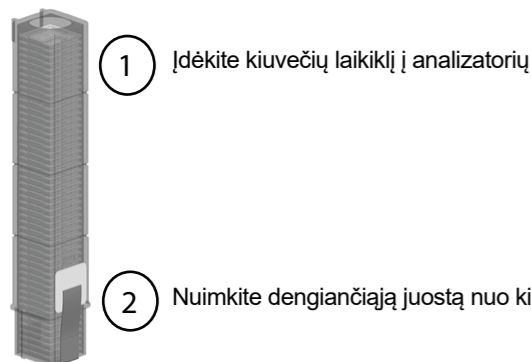

Aplinkos sąlygos

Laikymo temperatūra	0 – 45°C
Gabenimo temperatūra	-25°C – 60°C
Gabenimo drėgmė	20 – 80 %
Naudojimo sąlygos	Pagal jūsų analizatoriaus sąlygas

⚠️ Įspėjimai ir perspėjimai

- Nelaikykite kiuvečių tiesioginėje saulės šviesoje
- Nenuimkite dengiančiosios juostos nuo kiuvečių laikiklio prieš dėdami jį į analizatorių
- Neišimkite iš dalies užpildytų kiuvečių laikiklių iš analizatoriaus
- Visos kiuvetės yra vienkartinės, neatlikite tyrimo su anksčiau naudota kiuvete
- Šlapimas yra žmogiškos kilmės skystis, jis gali būti infekuotas ir kelti biologinį pavojų
- Su panaudotomis kiuvetėmis „UriSed“ ir šlapimo teršalais elkitės atsargiai
- Šalinkite atliekas pagal priimtas laboratorijos instrukcijas ir procedūras
- Kreipkitės į platintoją, kad užsakytumėte kiuvetes, suderinamas su konkrečiu savo analizatoriumi
- Panaudokite kiuvetes iki galiojimo pabaigos datos

ℹ️ Žr. analizatoriaus naudojimo instrukcijas, jei prireiktų informacijos apie mėginių rinkimą, galimus parengtinius veiksmus, rezultatų skaičiavimą, analitines ir veikimo charakteristikas, trukdžius, apribojimus, kokybės kontrolės procedūras, konkrečius įspėjimus ir perspėjimus.

Pranešimai apie incidentus

Praneškite apie bet kokius rimtus incidentus, įvykusius naudojant šį gaminį, „77 Elektronika“ priežiūros atstovui ir vietinei kompetentingai institucijai.

Simboliai:

	Unikalus priemonės identifikatorius
	In vitro diagnostikos medicinos priemonė
	Katalogo numeris
	Partijos numeris
	CE žyma rodo, kad gaminys atitinka taikomas Europos Sąjungos direktyvas
	Naudoti iki
	Temperatūros apribojimai
	Gamintojas
	Saugoti nuo saulės šviesos
	Žr. naudojimo instrukcijas
	Drėgmės apribojimai
	Perspėjimas
	Biologiniai pavojai
	Turinio užtenka 600 tyrimų
	NENAUDOTI pakartotinai
	Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
	Lietuvių kalba
	Serijos numeris

Versijų istorija

Versija	Data	Pakeitimai
3	2022.03.25	IVDR atitikties atnaujinimas
2	2020.11.25	Bendras turinio atnaujinimas
1	2009.02.17	Pirmasis leidimas

Gamintojas:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
VENGRIJA
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Faksas: + 36 1 206 - 1481