




Dcont® | NOVUM

egyéni vércukormérő készülék
önellenőrzésre

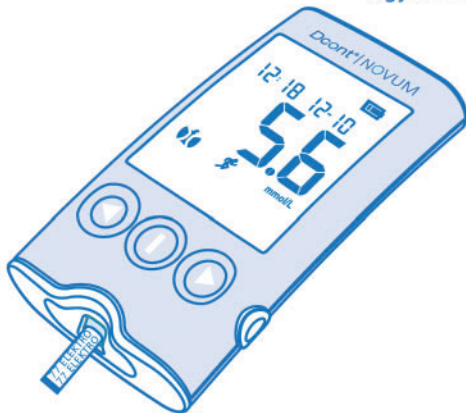

77 ELEKTRONIKA KFT.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Dcont® | NOVUM

egyéni vércukormérő készülék
önellenőrzésre



MIELŐTT MEGKEZDENÉ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT

Alaposan olvassa el a Dcont® NOVUM, az ETALON Teszt tesztcsík és az ujjszűrő használati utasítását a mérések megkezdése előtt! A javasolt mérési módszertől, illetve a készülék használati útmutatójában foglaltak szerinti kezeléstől való eltérés téves eredményekhez vezethet. Ez befolyással lehet egészségi állapotára és csökkentheti a készülék biztonsági szintjét.

Ellenőrizze a készülék és a tesztcsík csomagolásának sértetlen állapotát felhasználás előtt! Sérült csomagolású, vagy lejárt tesztcsíkot ne használjon, mert az a mérés pontosságát befolyásolhatja!

A készülék és a tesztcsík testen kívüli (in vitro) mérések elvégzésére alkalmas. Eredeti funkciója szerint a pillanatnyi vércukorérték meghatározására fejlesztett és gyártott eszköz. A gyártó a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő alkalmazásmódból eredő következményekért nem vállal felelősséget!

A rendszer egyetlen elemét se nyelje le, vagy használja más célra, mint ami a használati utasításokban szerepel!

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	5
A készülék bemutatása.....	5
A készülék felépítése.....	7
Tesztcsík.....	8
Vérminta.....	8
A vérminta gyűjtése.....	9
Alternatív vérvételi helyek.....	9
Mikor használjon alternatív vérvételi helyet?.....	10
A vérminta felhasználása.....	11
Vércukormérés.....	12
A vércukormérés lépései.....	12
Vércukormérés sötétben.....	14
Eredmények megjelölése.....	14
Étkezés és fizikai aktivitás jelölő.....	14
Az eredmény értelmezése.....	15
Az alacsony (Lo) és magas (Hi) vércukorszint hatása.....	16
Eredmények összehasonlítása.....	17
A készülék fő funkciói.....	17
Események rögzítése.....	17
Eredmények visszakeresése.....	19
Mérési napló.....	19
Átlag.....	19
Becsült Hipo eseményszám.....	21
Becsült HbA1c tartomány.....	22

Szórás.....	23
Értékek megoszlása.....	24
Beállítások.....	26
Idő/Dátum.....	27
Diabétesz típusa.....	27
Billentyűhang.....	28
LED.....	29
Mérési sablon.....	30
Figyelmeztető jelzések/emlékeztetők.....	31
Étkezés utáni emlékeztető.....	32
Hipo esemény utáni emlékeztető.....	33
Célértékek.....	34
Mérések törlése.....	36
Online vércukornapló.....	37
Adatfeltöltés számítógépen.....	37
Készülék ellenőrzése.....	38
Karbantartás és hibaelhárítás.....	40
Elemcsere.....	40
Tisztítás.....	41
Tárolás.....	41
Kijelző üzenetek és hibaelhárítás.....	42
A szett tartalma.....	48
Műszaki adatok.....	49
Szimbólumok.....	51
Hivatkozások.....	52
Jótállás.....	53
Gyártó, szerviz és ügyfélszolgálat.....	54

BEVEZETŐ

A vércukorszint pontos ismerete alapvetően befolyásolja kezelésének minőségét, ezen keresztül egészségi állapotát és közérzetét. A Dcont® NOVUM vércukormérő egy olyan korszerű készülék, amely segítségével egyszerűen és megbízhatóan tudja ellenőrizni a pillanatnyi vércukorszint értékét.

A helyes használathoz meg kell ismernie a készülék működését. Jelen használati útmutató részletesen bemutatja a készülék használatát és a mérés elvégzésének helyes módját.

Amennyiben a készülék használatával kapcsolatban olyan kérdése merül fel, amire a használati útmutatóban nem talál választ, kérjük, keresse meg ügyfélszolgálatunkat, vagy honlapunkat.

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A készülék a pillanatnyi vércukorszintet határozza meg oly módon, hogy érzékeli a vérminta glükóz tartalmával arányosan, a tesztcsíkban kialakuló (emberekre ártalmatlan) elektromos áramot.

A vércukormérő készülék az ETALON Teszt tesztcsík használatára hitelesített. Más típusú tesztcsík nem használható! A kijelzett vércukorérték a vérplazma vércukorszintjének megfelelő. A méréshez friss kapilláris, teljes vért használjon (lásd „Vérminta” fejezet). A rendszer visszavezethető NIST referenciára.

A készülék lehetőséget biztosít arra, hogy a vércukor eredményei mellett az étkezési és fizikai aktivitásának állapotát is rögzítse. A jelölők folyamatos használata megkönnyíti Önnek és a kezelőorvosnak is az eredmények értékelését (lásd „Eredmények megjelölése” fejezet).

A készülék az utolsó 720 adatot (vércukorérték, inzulin- vagy szénhidrátbevitel mennyisége) a rögzítés dátumával és időpontjával együtt automatikusan eltárolja. A készülék ellenőrzi a pontos méréshez szükséges környezeti hőmérsékletet és nem megfelelő érték esetén hibaüzenetet ad.

A készülék csipogó hanggal jelzi a használat fontos eseményeit: a gombok lenyomását, a hibaüzeneteket és a mérési folyamat lépéseit.

A készülék önellenőrzésre szolgál. A 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet alapján in vitro (testen kívüli) mérésre alkalmas eszköz. A készülék megfelel az elektromos kisüléssel, nagy frekvenciás besugárzással, továbbá az elektromos zavarkeltéssel szembeni követelményeknek.


A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE



TESZTCSÍK

A készülék az ETALON Teszt tesztcsíkkal együtt alkot egy rendszert. Olvassa el a tesztcsik használati utasítását is, mielőtt megkezdí a rendszer használatát.

Az ETALON Teszt tesztcsíki univerzális kódolású, azaz új tubus tesztcsíki használatba vételekor nem kell a kódot állítani a készülékben.

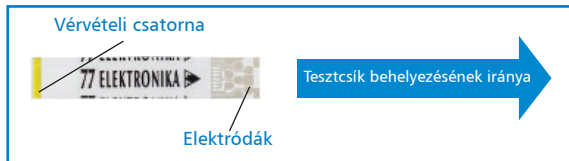

A tesztcsíkiot ütközésig kell betolni a készülék csíkfogadó nyílásába. A tesztcsíkiot a feliratokkal felfele és az elektródákkal előre kell a készülékbe helyezni. Amikor a csíki a helyére került, a készülék automatikusan bekapcsol.

VÉRMINTA

Az ujj megszurásához, a készülékhez mellékelt ujjszúró készüléket és az egyszer használatos lándzsákat ajánljuk. Fertőzésveszély miatt egy lándzsát csak egy személy használhat. Kérjük, olvassa el az ujjszúróhoz mellékelt használati utasítást is!



FIGYELEM!

A tesztcsíki és a lándzsá egyszer használatos eszköz, mérés után vérrel szennyezett, ezért körültekintően semmisítse meg!

A vérminta gyűjtése

1. Szűrés előtt meleg szappanos vízzel mossa meg a vérvétel helyét!
2. Törölje szárazra! Ez serkenti az adott terület vérkeringését.
3. Ha ujjbegyből vesz vért, akkor a szűréshez az ujjbegy oldalsó részét használja. A kevesebbet használt kéz gyűrűs és középső ujjai kevésbé fájnak.
4. Ha nem sikerül elégséges mennyiségű vért összegyűjteni, az ujjat a tövétől a vége felé masszírozva segítse a vércsepp kialakulását. (De semmiképpen ne erőltesse vagy préselje az ujjbegyeket!)

Alternatív vérvételi helyek

Nem csak az ujjbegyből vagy tenyérből vett vércsepp alkalmas a mérés elvégzésre. Alternatív vérvételi helyek¹ (alkar, felkar, comb) használata esetén fontos, hogy:

- egyeztessen orvosával ennek lehetséges hatásairól,
- mindig jegyezze fel a diabétesz naplóba is, hogy alternatív helyen történt a vérvétel.



Mikor használjon alternatív vérvételi helyet?

Az ujjbegyben gyorsabban változik a vér pillanatnyi vércukorszintje, így az alternatív vérvételi helyek használata mellett kapott eredmények értelmezése kérdéses lehet, és téves döntést okozhat a terápiájával kapcsolatban.

Az étel, orvosságok, betegség, stressz, fizikai aktivitás mind-mind hat a vércukorszintre. Az ujjbegyben lévő hajszálérben keringő vér hamarabb reagál a vércukorszintváltozásra, mint más helyek a testen. Ezért, ha étkezés közben, vagy közvetlenül étkezés, testmozgás, vagy egyéb, a vércukorszintet befolyásoló esemény után mér vércukorszintet, vegye a vérmintát az ujjbegyéből.

Nyomatékosan tanácsoljuk, hogy alternatív vérvételt csak az alábbi esetekben végezzen:

- étkezés előtt közvetlenül, vagy étkezés után legalább két órával,
- inzulin beadás előtt közvetlenül, vagy inzulin beadás után legalább két órával,
- legalább két órával fizikai aktivitás után.

Ne végezzen alternatív vérvételi helyen mérést:

- étkezés, vagy fizikai aktivitás után,
- ha rosszul érzi magát,
- ha úgy gondolja, hogy a vércukorszintje alacsony,
- ha hiperglikémiára vonatkozó vizsgálat alatt áll,
- ha a rutin vércukormérések eredménye ingadozó.

Ismételje meg a vércukormérést, ha az alternatív vérvétel mérési eredménye eltér a mért vércukorértéknél megszokott közérzetétől!



FIGYELEM!

Minden eszköz, amely kapcsolatba kerül az emberi vérrrel, potenciális fertőzési forrás lehet! Figyeljen erre mind az eszközök tisztításakor, mind az elhasznált eszközök megsemmisítésekor!

A vérminta felhasználása

HELYES!



HELYTELEN!



FIGYELEM!

- A tesztcsíkot szobahőmérsékleten kell tárolni, óvja szélsőséges hőhatásoktól, nedvességtől és a magas páratartalomtól!
- A tesztcsíkot ne tartsa hűtőszekrényben, és ne tárolja gépkocsiban sem!
- A tubusból való kivétel után a tesztcsíkot rögtön használja fel és a tubust azonnal zárja (kattanásig) vissza!

- Ne gyűrje, vágja, vagy módosítsa a tesztcsíkot!
- Ne használjon sérült, vagy szennyezett tesztcsíkot a méréshez!
- Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot!
- Ne cseppentsen a tesztcsíkra! A tesztcsík elejét függőlegesen érintse a vérmintához „A vérminta felhasználása” fejezetben leírtak szerint.
- A tesztcsík kapillárisa (a sárga vége teljes szélességében) felszívja a működéshez szükséges mennyiségű vért.
- A túl kis vércsepp hibaüzenetet eredményez! Ha a vérvételi csatorna (a tesztcsík sárga vége) nem tördik fel teljesen vérrel, ismétlje meg a mérést egy új tesztcsíkkal!
- Ne mérjen ugyanabból a vércseppből kétszer!

VÉRCUKORMÉRÉS

Mielőtt megkezdéné a vércukormérést, győződjön meg a készülék helyes beállításairól!

A vércukormérés lépései

1. Mossa, majd szárítsa meg a kezét és készítse elő az ujjszúrót.
2. Vegyen ki egy tesztcsíkot a tubusból, majd azt azonnal (kattanásig) zárja vissza.
3. Helyezze be a tesztcsíkot a készülékbe ütközésig, az elektródákkal előre.



4. Szúrja meg az ujját az ujjbegy szélénél és gyűjtsön össze egy vércseppet.
5. Amikor a vércsepp animáció megjelenik a kijelzőn, érintse a tesztcsikot a vércsepphez.
6. A készülék automatikusan elvégzi a mérést és négy másodperc után megjelenik az eredmény.
7. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal az eredmény megjelölhető. A jelölőkről részletesen az „Eredmények megjelölése” fejezetben olvashat.
8. Az eredményt jegyezze fel a diabétesz naplóba.
9. A csíkkidobó segítségével távolítsa el a tesztcsikot a készülékből!
Tartsa a készüléket függőleges helyzetben és ütközésig nyomja be a készülék oldalán található gombot. Ekkor a tesztcsik magától kiesik a csíktartóból. A tesztcsik kivétele után a készülék tárolja a mért értéket a memóriában és automatikusan kikapcsol.



FIGYELEM!

Ha a mérés közben hibaüzenet jelenne meg, tanulmányozza a „Képernyő üzenetek és hibaelhárítás” fejezetet.

A tesztcsik veszélyes hulladék, ezért a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, figyelemmel semmisítse meg!

Az adatok helyessége érdekében rendszeresen ellenőrizze készüléke Idő/Dátum beállítását (beállításért lásd „Idő/Dátum” fejezetet)!



Vércukormérés sötétben

A készülék csíkmegvilágító LED-ekkel rendelkezik, ezek a csíkfogadó nyílás mellett helyezkednek el. Használatához a készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a KI/BE/OK (ⓘ) gombot, amíg a LED bekapcsol. Ekkor helyezze be a tesztcsíkot, majd végezze el a vércukormérést a szokott módon.

A vérfelvételt követően a világítás automatikusan kikapcsol.

A használat feltétele, hogy a funkciót engedélyezze a Beállítások/ LED menüpontban.


Eredmények megjelölése




Jelölje meg a mérés eredményét pillanatnyi fizikai állapotának megfelelően. Ez lehetőséget ad arra, hogy később pontosan tudja értelmezni a memóriában tárolt eredményeket.

Étkezés és fizikai aktivitás jelölő

A mérés végén a BALRA (◀) gomb lenyomásával tudja az étkezéssel kapcsolatos, a JOBBRA (▶) gombbal a fizikai aktivitás és Egyéb érték jelölőket beállítani.

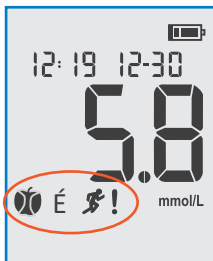A beállított jelölő mentéséhez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.



Leírás	Szegmens
Étkezés előtti ikon	
Étkezés utáni ikon	
Éhomi ikon	É
Fizikai aktivitás ikon	
Egyéb mérési eredmény ikon	!

Az Egyéb jelölővel tudja jelezni, hogy a mért eredmény valamilyen szempontból szokatlan.

Az így megjelölt értékeket a készülék nem veszi bele az átlagértékek, becsült hipo eseményszám, HbA1c értéktartomány, szórások és tartománybeli megoszlások számításába.



FONTOS!

A KI/BE/OK (Ⓢ) gomb megnyomásáig tudja beállítani a jelölőket. A mérés eredménye és a beállított jelölők a kikapcsolással egy időben tárolódnak a memóriában. A korábban már tárolt jelölők és vércukoreredmények később nem módosíthatók.

AZ EREDMÉNY ÉRTELMEZÉSE

A normál éhomi vércukorérték diabéteszben nem érintett felnőttek esetében nem emelkedik 6,0 mmol/l fölé, és két órával étkezés (vércukor terhelés) után mérve 7,8 mmol/l alatt marad!²

Diabétesz vagy annak gyanúja esetén forduljon kezelőorvosához, aki meghatározza, az Ön számára optimális vércukortartományokat. Ha a mért vércukoreredmény nem azt tükrözi, ahogyan Ön érzi magát, ismételje meg a mérést. Szükség esetén forduljon a kezelőorvosához!

A készülék képes arra, hogy vizuális visszajelzést adjon (színes LED-fény a készülék alján) arról, ha a beállított határ alá, illetve fölé esik vagy a céltartományon belül van a mért vércukorszint eredmény. További információk a Célértékek fejezetben. A vizuális (fény)visszajelzés csak tájékoztató információ, minden esetben a kijelzett számértéket vegye figyelembe!



Az alacsony (Lo) és magas (Hi) vércukorszint hatása

Az alacsony vércukorszint (hipoglikémia) tipikus tünetei az éhségérzet, szaporább pulzus és/vagy légzés, verejtékezés, szédülés, bizonytalan járás, homályos tudat, eszméletvesztés³.

A magas vércukorszint (hiperglikémia) tipikus tünetei a szájszárazság, szomjúságérzet, fokozódó mértékű gyengeség, majd hányinger, hányás, súlyosabb esetben tudatzavar és kóma³.

Folyamatosan figyelje magát. Akár magas, akár alacsony vércukorszintre utaló jeleket észlel magán, ellenőrizze vércukorméréssel!

A Hi (túl magas) és Lo (túl alacsony) értékekről bővebben a „Képernyő üzenetek és hibaelhárítás” fejezetben olvashat.

Eredmények összehasonlítása

A laborban és az otthon mért vércukorértékek eltérhetnek egymástól. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a készülékkel probléma lenne. Az emberi szervezetben a vércukorszint folyamatosan változik, különösen étkezések után és fizikai aktivitás közben, ezért összehasonlítást csak megfelelő körülmények között lehet elvégezni.

Amennyiben a laboreredményt és az Ön vércukormérője által adott eredményt össze akarja hasonlítani, javasoljuk, hogy éhomi állapotban végezze a mérést. A laborban végzett vérvételt követő 5 percen belül mérjen a saját készülékével. Az eredmény értelmezésében sok szempont játszik szerepet, ezeket figyelembe véve, általánosságban, a két érték +/-15%-os eltérést mutathat. Ha ettől eltérő eredményt tapasztal, tanulmányozza a „Képernyő üzenetek és hibaelhárítás” fejezetet, vagy forduljon szakszervizünkhöz.

A KÉSZÜLÉK FŐ FUNKCIÓI

A KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával a készülék mérési funkcióval kapcsol be és a tesztcsík behelyezését kéri. Innen a BALRA (◀) gombbal a Mérési naplóba, a JOBBRA (▶) gombbal az átlagokhoz juthat, a KI/BE/OK (ⓘ) gomb hosszú megnyomásával (5 másodperc) a készülék a Beállítások menübe lép.

A Beállítások menüben a KI/BE/OK (ⓘ) gomb hosszú nyomva tartásával a készülék visszalép a „Tesztcsíkra vár” képernyőre. Tesztcsík behelyezésével automatikusan elindul a mérés funkció.

A készülék 90 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Kikapcsolt állapotban a készülék BALRA (◀) gombjának megnyomásával szénhidrát, a JOBBRA (▶) gombbal inzulinbeviteli esemény rögzíthető.

ESEMÉNYEK RÖGZÍTÉSE

A készülékben lehetősége van a szénhidrát, illetve inzulinbeadás időpontjának és mennyiségének rögzítésére, ami teljesebb képet adva segít Önnek és kezelőorvosának az anyagcserehelyzetének jobb megértésében és az egyensúly megtartásában.



Kikapcsolt állapotban a készülék BALRA (◀) gombjának megnyomásával szénhidrát-, a JOBBRA (▶) gombbal inzulinbeviteli eseményt állíthatja be, a megfelelő állapot kiválasztása után a KI/BE/OK (①) gomb rövid megnyomásával léphet tovább a mennyiség megadásához.

A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal csökkentheti vagy növelheti a megjelenő mennyiséget, a gombok nyomva tartásával a készülék automatikusan lépteti a mennyiséget. A megfelelő érték kiválasztását követően a KI/BE/OK (①) gomb rövid megnyomásával mentheti az eseményt, megjelenik az OK felirat és a készülék kikapcsol.



FONTOS!

Ha a JOBBRA (▶) vagy a BALRA (◀) gombot véletlenül nyomja meg; azaz nem szeretne inzulin vagy étkezés eseményt rögzíteni; a JOBBRA (▶) vagy BALRA (◀) gomb ismételt megnyomásával érvénytelenítheti az eseményt. Ha az eseménytípus kiválasztása után a KI/BE/OK (①) gombot hosszan nyomja meg, a készülék mentés nélkül kikapcsol.

EREDMÉNYEK VISSZAKERESÉSE

Mérési napló

A készülék minden mérési eredményt és rögzített (étkezés és inzulin) eseményt automatikusan eltárol. Az eredmények a rögzítés sorrendjében tárolódnak.

Az eredmények visszakereséséhez kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával, majd amikor a készülék a tesztcsík behelyezését kéri, a BALRA (◀) gombbal jut a Mérési napló menüpontba.

A memóriában az utoljára mért érték jelenik meg először. Amennyiben a memória üres, a " - - - " felirat jelenik meg.

A BALRA (◀) gombbal tud időben visszafele, a JOBBRA (▶) gombbal tud időben előre haladni az eredmények között. A KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával a készülék bármikor kikapcsolható.



FONTOS!

A mérési naplóban szereplő inzulin és szénhidrát mennyiségek kézzel felvitt, tájékoztató információk, nem a vércukormérő által mért adatok. Ezt a vércukoreredmények értékelésekor vegye figyelembe!

Átlag

Az átlagszámítás üzemmód sokrétű információkkal támogatja mérési eredményeinek értelmezését:

- kiszámolja az elmúlt 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap mérési eredményeinek az átlagát,
- megmutatja, hogy az adott időszakban hány érvényes eredménye volt ("Egyéb" jelölővel jelölt, vagy „Hi”, „Lo” vércukoreredmények nem számítanak bele az átlagba).

Kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gombbal, majd a JOBBRA (▶) gombbal jut az átlagokhoz.





A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal lehet a különböző időtartamokra számított átlagok között váltani, sorrendben: 7, 14, 30, 60 és 90 nap.

Az Összes átlagérték értelmezése szempontjából fontos, hogy az étkezés előtti és az étkezés utáni eredmények egyenletes arányban legyenek jelen a számításban. Ekkor az átlagérték jobban jellemzi a valós, átlagos vércukorértéket.


A jellemzően csak étkezés előtti mérésekből számított átlag alacsonyabb értéket fog mutatni, mint a jellemzően étkezés utáni adatokból számított érték.

A KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.



FONTOS!

- Az átlagszámítás csak akkor ad pontos eredményt, ha a dátum és az idő helyesen van beállítva! Ha a memóriában szereplő adatok nincsenek dátum szerint sorrendben, a készülék nem tudja az adott időszakra kiszámolni a statisztikákat. A felirat villogása azt jelzi, hogy a mérési naplóban a vizsgált időszakon belül mérési tartományon kívül eső „Hi” vagy „Lo” adat, vagy bizonytalan értékű vagy idejű minta található.
- A készülék „- - -” felirattal jelzi, ha a memóriában még nincs értékelhető mérési eredmény az adott szűrési feltételek mellett.

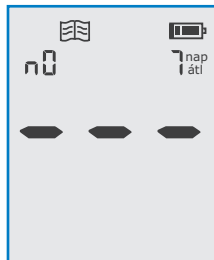

Becsült Hipo eseményszám

Ezt a funkciót a Mérési napló menüben az Átlag értékek kijelzését követően éri el. A 90 nap átlagértékének kijelzését követően nyomja meg a JOBBRA (►) gombot.

A készülék a tárolt vércukormérési eredmények alapján értékeli a hipoglikémia (Hipo=Hipoglikémia) kialakulásának kockázatát. A kockázati érték alapján – változatlan kezelési feltételek mellett – megbecsüli az elkövetkező 30 napban várható hipoglikémia számot (Becsült Hipo eseményszám). A funkció feltétele, hogy az utolsó 45 napon belül legalább 90 mérési adat legyen a készülékben.⁴

A becült érték alapján három fokozatba történik a kockázat besorolása:

- ha az érték <4, akkor kicsi a kockázat (KIS KOCKÁZAT)
- ha az érték 4 és 7 között van, akkor közepes a kockázat (ÁTLAGOS KOCKÁZAT)
- ha az érték 8 vagy e feletti, akkor nagy a kockázat (NAGY KOCKÁZAT)


Átlagos és nagy kockázat kijelzése esetén kérjük, konzultáljon kezelőorvosával az esetleg szükséges teendőkről. Bármely szokatlan, az Ön számára nem értelmezhető adat esetén kérjük kérdezze meg kezelőorvosát.

A készülék „- - -” felirattal jelzi, ha a memóriában még nincs elegendő mérési eredmény a becült hipo eseményszám kijelzéséhez.



FONTOS!

A megfelelő érték kijelzéséhez elengedhetetlen, hogy a Beállításoknál megadja a diabétesz típusát! A felirat villogása azt jelzi, hogy a mérési naplóban a vizsgált időszakon belül mérési tartományon kívül eső „Hi” vagy „Lo” adat, vagy bizonytalan értékű vagy idejű minta található.

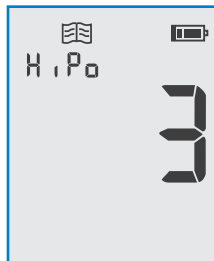

Becsült HbA1c tartomány

Kiegyensúlyozott vércukormérés esetén a készülék egy további speciális információt is biztosít az átlag vércukorérték számítása mellett.

A becsült HbA1c értéktartomány akkor lesz látható, ha legalább 30 nap időtartamban minden nap rendszeresen történik vércukormérés, illetve az étkezés előtti és az étkezés utáni jelölővel ellátott eredmények kiegyensúlyozottan vannak jelen az adatok között.

A becsült HbA1c tartomány megadása azokat az értékhatárokat jelöli, melyen belül várható a becsült HbA1c érték.⁴





FONTOS!

A megadott értéktartomány csak becsült érték, egyéni eltérések lehetségesek. Minden esetben egyeztessen kezelőorvosával a kapott értéket illetően. A becsült HbA1c nem helyettesíti a laboratóriumi meghatározással mért HbA1c értéket, csak tájékoztató jellegű adatot ad.⁴

A felirat villogása azt jelzi, hogy a mérési naplóban a vizsgált időszakon belül mérési tartományon kívül eső „Hi” vagy „Lo” adat, vagy bizonytalan értékű vagy idejű minta található.


Ezt a funkciót a Mérési napló menüben az átlag és becsült hipo eseményszám értékek kijelzését követően éri el. A becsült hipo eseményszám kijelzését követően nyomja meg ismét a JOBBRA (►) gombot. A becsült HbA1c tartomány alsó és felső határa váltakozva jelenik meg a kijelzőn.

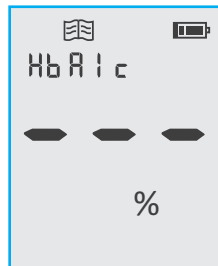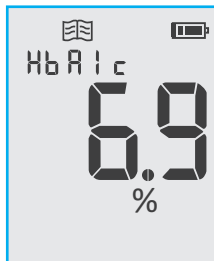

SZÓRÁS

A szórás üzemmód sokrétű információkkal támogatja mérési eredményeinek értelmezését:

- kiszámolja az elmúlt 7, 14, 30, 60 vagy 90 nap mérési eredményeinek a szórását,
- megmutatja, hogy az adott időszakban hány érvényes eredménye volt ("Egyéb" jelölővel jelölt, vagy „Hi”, „Lo” vércukoreredmények nem számítanak bele a szórásba).

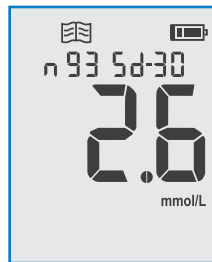


Ezt a funkciót a Mérési napló menüben a becsült Hipo eseményszám és becsült HbA1c értékek kijelzését követően éri el. A HbA1c kijelzését követően nyomja meg ismét a JOBBRA (►) gombot. A BALRA (◄) és a JOBBRA (►) gombokkal lehet a különböző időtartamokra számított szórások között váltani, sorrendben: 7, 14, 30, 60 és 90 nap. A KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.



FONTOS!

- A szórás számítás csak akkor ad pontos eredményt, ha a dátum és az idő helyesen van beállítva! Ha a memóriában szereplő adatok nincsenek dátum szerint sorrendben, a készülék nem tudja az adott időszakra kiszámolni a statisztikákat.

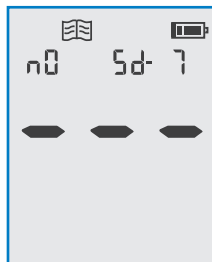




- A készülék „- - -” felirattal jelzi, ha a memóriában még nincs értékelhető mérési eredmény az adott szűrési feltételek mellett.
- A készülék a szórás Bessel-féle korrekcióval számolja.

Értékek megoszlása

Kiegyensúlyozott vércukormérés esetén a készülék képes megjeleníteni a Céltartományba, illetve tartományon kívül eső mérések százalékos arányait.

A készülék megjeleníti, hogy az elmúlt 30 napban a jelölővel ellátott és/vagy céltartományok szerint egyértelműen besorolható vércukormérések hány %-a esik a céltartományba, az alá vagy fölé. Kijelzés feltétele, hogy az utolsó 30 napban legyen a memóriában legalább 90, céltartományok szerint egyértelműen besorolható mérési eredmény.

Ezt a funkciót a Mérési napló menüben a Szórás értékek kijelzését követően éri el. A 90 nap szórásértékének kijelzését követően nyomja meg ismét a JOBBRA (▶) gombot.

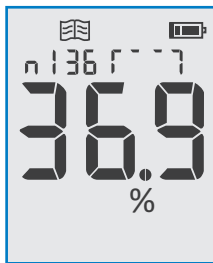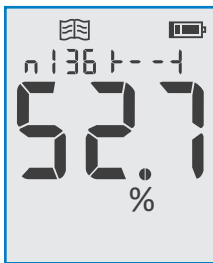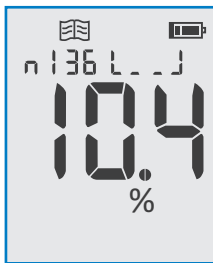


A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal lehet a Céltartomány alatti, tartományon belüli, Céltartomány feletti arányok között váltani.

A KI/BE/OK (①) gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.



FONTOS!

- A számítás csak akkor ad pontos eredményt, ha a dátum és az idő helyesen van beállítva. Ha a memóriában szereplő adatok nincsenek dátum szerint sorrendben, a készülék nem tudja az adott időszakra kiszámolni a statisztikákat.
- A készülék „- - -” felirattal jelzi, ha a memóriában még nincs értékelhető mérési eredmény az adott szűrési feltételek mellett.

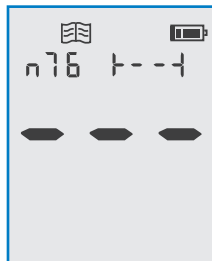

BEÁLLÍTÁSOK


A készülék beállításai és speciális üzemmódjai a Beállítások menüből érhetők el.

A Beállítások menü elindításához kapcsolja be a készüléket KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid lenyomásával, majd amikor a „Tesztcsíkra vár” képernyő megjelenik, ismét nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot hosszan, amíg belép a készülék menürendszerébe. A kijelző bal felső sarkában megjelenik a fogaskerék ikon, illetve villog az aktuális menüpont ikonja. A menü elemei között a BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal tud léptetni, az egyes menüpontokba a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lép be. Mindig azt az értéket lehet állítani, aminek a szegmense éppen villog. Az útmutatóban piros körökkel jelöljük.

Az aktuális beállítás alpontjain a BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal tud állítani, a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet végig haladni, illetve a végén a módosítást elmenteni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és visszalép a Beállítások menübe.


A Beállítások menüből az utolsó „KI” menüponttal léphet vissza. Nyomja meg röviden a KI/BE/OK (ⓘ) gombot, ekkor a készülék kilép a menüből, és a tesztcsík behelyezésére váró animáció jelenik meg a kijelzőn.

Amennyiben menet közben ki szeretne lépni a menürendszerből, akkor a KI/BE/OK (ⓘ) gomb hosszú nyomva tartásával visszalép a készülék a „Tesztcsíkra vár” képernyőre, folyamatban lévő beállításnál az utoljára mentett értéket megtartva lép ki a készülék.

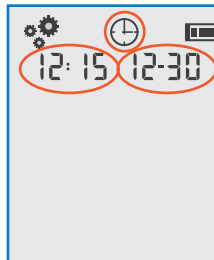

Idő/Dátum

Ha Ön regisztrált Dcont eNapló felhasználó akkor a készülék a számítógéphez történő csatlakozáskor automatikusan frissíti a dátum és idő beállításokat.

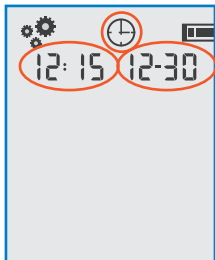

A pontos dátum és idő az alapja a memóriában tárolt adatok helyes kezelésének és értelmezésének. A készülék kezeli az éveket és a szökőeveket is.

A dátum és idő beállításához lépjen be a Beállítások / Idő/Dátum menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen az Idő/Dátum menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.

A dátum és idő beállítását lépésenként lehet elvégezni. A beállítás sorrendje óra – perc – hónap – nap – év. A szám villogása azt jelzi, hogy a BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével be lehet állítani az új értéket. A KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid lenyomása megerősíti az új beállítást és a következő beállítandó értékre ugrik.

Az év beállítása után a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid lenyomásával a készülék visszatér a Beállítások menübe és tárolja az összes új beállítást. A folyamatban lévő beállítás alatt a KI/BE/OK (ⓘ) gomb hosszú nyomva tartásával visszalép a készülék a „Tesztcsíkra vár” képernyőre, az Idő/Dátum beállítása nélkül.

Diabétesz típusa

A becsült Hipo eseményszám megfelelő kijelzéséhez elengedhetetlen, hogy megadja a diabétesz típusát!

A diabétesz típusa beállításához lépjen be a Beállítások / Diabétesz típusa menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.



A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Diabétesz típusa menüponthoz, majd a menüpontra belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.

A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombokkal válthat az 1-es és 2-es típus között


Amennyiben nem tudja a diabétesz típusát, válassza a 2-es típust.

A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni.

Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és visszalép a Beállítások menübe.

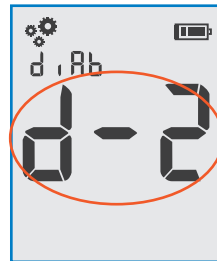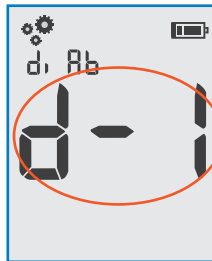

Billentyűhang

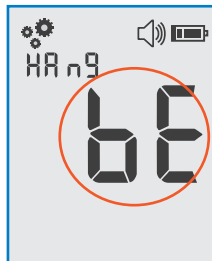

A készülék csipogó hanggal jelzi a használat fontos eseményeit: a gombok lenyomását, a hibaüzeneteket és a mérési folyamat lépéseit is.

A billentyűhang beállításához lépjen be a Beállítások / Billentyűhang menüpontra: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd

a Beállítások menühez hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Billentyűhang menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.


A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombok segítségével válasszon a kikapcsolt, vagy bekapcsolt állapot között. A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást és visszalép a Beállítások menübe.

LED

A készülék csikmegvilágító LED-ekkel rendelkezik, ezek használatával sötétben is végezhető vércukormérés. A LED funkció beállításához lépjen be a Beállítások / LED menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühez hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a LED menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.

A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombok segítségével válasszon a kikapcsolt, vagy bekapcsolt állapot között.

A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és visszalép a Beállítások menübe.

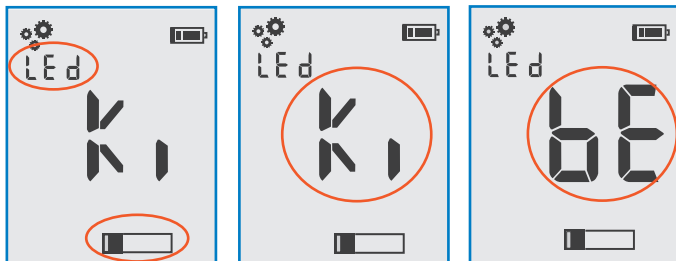

Mérési sablon (Dcont eNapló regisztrált felhasználók részére)

Lehetőség van rá, hogy a kezelőorvosa által meghatározott mérési séma alapján a vércukormérő készüléke figyelmeztesse a soron következő mérés elvégzésére.

A Sablon időpontjainak beállítására a Dcont® eNAPLÓ-ban van lehetőség, ehhez csatlakoztassa vércukormérőjét a számítógéphez.

A sablon figyelmeztetések be vagy kikapcsolásához lépjen be a Beállítások / Sablon menüpontba, kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Sablon menüponthoz, majd a menüponthoz való belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gombokkal választhat az engedélyezés, vagy tiltás között (Ki, vagy Bekapcsolás).


A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és viszszalép a Beállítások menübe.

Amennyiben a sablon időpontjai még nem lettek megadva, a menüben a „- - -” felirat jelenik meg.



FONTOS!

Amennyiben a Mérési sablon be van kapcsolva, a beállított figyelmeztető jelzések (F-1 – F-4) automatikusan kikapcsolásra kerülnek.

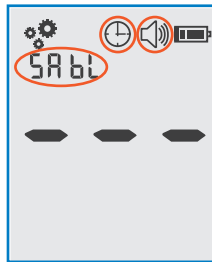

Figyelmeztető jelzések / emlékeztetők

A figyelmeztető, vagy alarm jelzések segítenek abban, hogy az időhöz kötött eseményekről ne feledkezzen meg. A készülék csipogó hanggal jelzi az aktuális időpontot.

Egyszerre maximum négy figyelmeztető időpontot (F-1, F-2, F-3, F-4) lehet beállítani. A beállított időpontok napról napra ismétlődnek.

A figyelmeztető jelzések beállításához lépjen be a Beállítások / Figyelmeztető jelzések menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Figyelmeztető jelzések menüponthoz.

Az alarm jelzések a készülék első használatakor nem aktívak (KI), a használatukhoz be kell állítani a kívánt időpontot. Amikor KI feliratot látja, a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával kapcsolhatja be az F-1 figyelmeztető időpontot.

Amikor a BE feliratot látja, először az órát lehet beállítani a BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gombokkal.

A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gombbal lehet lezárni.

Az óra után a figyelmeztetés időpontjának percét kell beállítani a BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gombokkal.

A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gombbal lehet lezárni. További időpontokat (F-2, F-3, F-4), az F-1 időpontnál leírtak szerint lehet beállítani.

Az aktív figyelmeztető kikapcsolásához nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot, majd a BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gombokkal válassza ki a KI feliratot. A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gombbal lehet lezárni.





FONTOS!

Ha a hangjelzés ki van kapcsolva, a figyelmeztetések ebben az esetben is hanggal jeleznek. Ha a készülék épp működött a figyelmeztetés időpontjában, akkor az üzenet nem fog megjelenni. Amennyiben a Mérési sablon be van kapcsolva, az esetlegesen beállított figyelmeztető jelzések (F-1 – F-4) automatikusan kikapcsolásra kerülnek.



Étkezés utáni emlékeztető

A készülék képes arra, hogy figyelmeztessen étkezés utáni mérésre. Amennyiben engedélyezi ezt a funkciót, minden étkezés előtti jelölővel ellátott mérést követően beállítástól függően 1- 1,5- 2 órával a készülék jelezni fog.

Az étkezés utáni emlékeztető beállításához lépjen be a Beállítások / Étkezés utáni emlékeztető menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen az Étkezés utáni emlékeztető menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.

A BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gomb megnyomásával kapcsolja ki vagy választhat 1, 1,5 illetve 2 óra közül.

A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és viszszalép a Beállítások menübe.

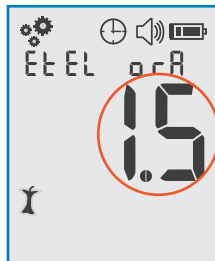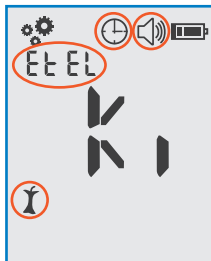

Hipo esemény utáni emlékeztető

A készülék képes arra, hogy figyelmeztesse Önt minden hipoglikémiás tartományba eső mérést követően az ismételt mérés szükségességére. Amennyiben engedélyezi ezt a funkciót, ezekben az esetekben a vércukormérő 10 - 15 vagy 20 perc elteltével jelezni fog.



A hipo esemény utáni emlékeztető beállításához lépjen be a Beállítások / Hipo esemény utáni emlékeztető menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Hipo esemény utáni emlékeztető menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot.

A BALRA (◀) vagy a JOBBRA (▶) gomb megnyomásával kapcsolhatja ki, vagy választhat 10, 15 illetve 20 perc közül. A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával lehet lezárni. Ekkor a készülék tárolja a beállítást, és visszalép a Beállítások menübe.



FONTOS!

A hipoglikémia megítélése minden esetben egyedi.
A beállított érték a személyre szabott terápia függvénye,
egyeztessen erről kezelőorvosával!

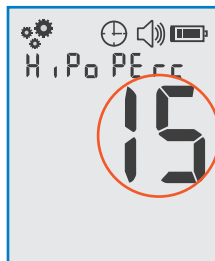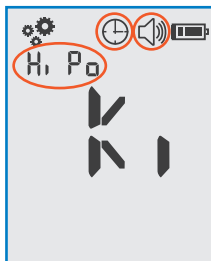

Célértékek

A készülék képes arra, hogy vizuális visszajelzést adjon arról - az étkezés jelölők megfelelő használata mellett -, ha a tartományon belül van, vagy a beállított határ alá, illetve fölé esik a mért eredmény. Aktív funkció esetén vércukormérést és a megfelelő étkezés-jelölő beállítását követően a készülék különböző színű LED-fénnyel ad visszajelzést:

- Céltartomány alatt: SÁRGA
- Tartományon belül: ZÖLD
- Céltartomány felett: PIROS

Az alapértelmezett éhomi és étkezés előtti céltartomány 4,0 - 7,2 mmol/l, hipoglikémia határ: 3,9 mmol/l, hiperglikémia határ: 10,0 mmol/l. Az étkezés utáni céltartomány-visszajelzés a készülék első használatakor nem aktív (a határérték megadása egyéni terápia függvénye), használatához - kezelőorvosával egyeztetve - adja meg az egyéni céltartományát.



FONTOS!

A hipoglikémia megítélése minden esetben egyedi.





A beállított érték a személyre szabott terápia függvénye, erről kezelőorvosával egyeztessen!

A célértékek beállításához lépjen be a Beállítások / Célértékek menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Célértékek menüponthoz, majd a menüpontra belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gombok segítségével válasszon az alapértelmezett (ALP=alap), felhasználó által megadható egyedi (SAJ=saját) vagy kikapcsolt (KI) állapot közül. A beállítást a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával a rögzítheti.

Egyedi (SAJ) állapot esetén az alsó-felső határok beállítását lépésenként lehet elvégezni. A beállítás sorrendje Éhomi alsó - Éhomi felső - Étkezés előtti alsó - Étkezés előtti felső - Étkezés utáni alsó - Étkezés utáni felső.

A szám villogása azt jelzi, hogy a BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével be lehet állítani az új értéket. A KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid lenyomása megerősíti az új beállítást és a következő beállítandó értékre ugrik. Az étkezés utáni felső határ megadása után a KI/BE/OK (ⓘ) gomb rövid megnyomásával a készülék tárolja a beállítást, és visszalép a Beállítások menübe.

A céltartomány beállítására a Dcont® eNAPLÓ-n keresztül is van lehetőség, további információkat a www.dcont.hu weboldalon olvashat.

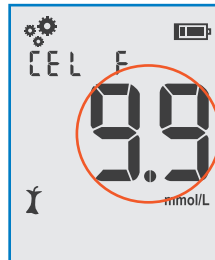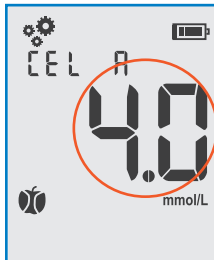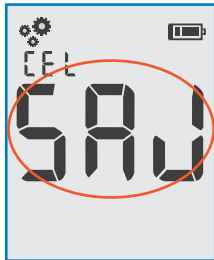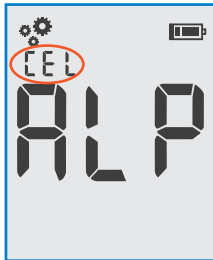

Mérések törlése



Lehetősége van a mérési napló törlésére, ami egy új kezelésmód és/vagy a vércukorszintjének beállítása során segítséget jelenthet, hogy a készülék valós, az új kezelés szerinti átlagokat jeleníti meg. A mérési napló törléséhez lépjen be a Beállítások / Memória törlése menüpontba: kapcsolja be a készüléket a KI/BE/OK (ⓘ) gomb megnyomásával, majd a Beállítások menühöz hosszan nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot. A BALRA (◀) és a JOBBRA (▶) gomb segítségével lépjen a Memória törlése menüponthoz, majd a menüpontba belépéshez nyomja meg a KI/BE/OK (ⓘ) gombot..

A véletlen adatvesztés elkerülése érdekében az adatok csak abban az esetben törlődnek, ha először a BALRA (◀), majd a JOBBRA (▶), utána ismét a BALRA (◀), végül a KI/BE/OK (ⓘ) gombot nyomja meg, eközben megjelenik az OKE felirat az alábbi képek szerint. Minden ettől eltérő esetben a készülék visszatér a beállítások menübe, az adatok változatlanok maradnak.



FONTOS!

A memória törlése minden esetben az összes adatot törli, egyedi értékek törlésére nincs lehetőség. Egyeztessen kezelőorvosával mielőtt ezt a funkciót használja!

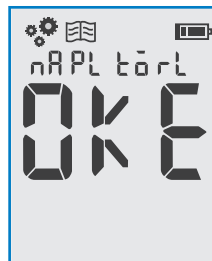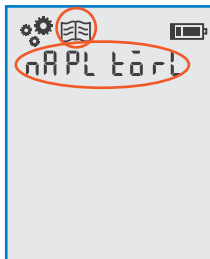

ONLINE VÉRCUKORNAPLÓ

A Dcont® eNAPLÓ szoftver és a Dcont® mobilalkalmazás független termékek, elérhetőségükkel kapcsolatban érdeklődjön vevőszolgálatunknál vagy a www.dcont.hu weboldalon.

Töltse fel a készülék memóriájában tárolt adatokat USB kábel segítségével a Dcont® eNAPLÓ internetes adatbázisba. Vércukorértékeit többféle jól átlátható grafikonon és táblázatban jelenítheti meg, melyeket egyszerűen kinyomtathat, illetve kezelőorvosával is megoszthat.

Adatfeltöltés számítógépen



FIGYELEM!

Mielőtt először csatlakoztatná a készülékét számítógépéhez, telepítse a szükséges drivereket és a Dcont® Adatfeltöltő programot, mely elérhető a www.dcont.hu/telepites oldalon.

Az adatok helyessége érdekében rendszeresen ellenőrizze készüléke Idő/Dátum beállítását! (lásd „Idő/Dátum” fejezet)

Amennyiben nem működik az adatfeltöltés, ellenőrizze a microUSB-kábelt!

Az adatletöltés folyamata:

- A számítógépen indítsa el a Dcont® Adatfeltöltő programot,
- Csatlakoztassa az USB kábelt vércukormérőjéhez és a számítógéphez,
- A számítógépén kattintson az “Adatfeltöltés indítása” gombra és várjon, amíg az adatküldés befejeződik.

További technikai segítségért látogasson el a www.dcont.hu weboldalra.




KÉSZÜLÉK ELLENŐRZÉSE

A készülék és az ETALON Teszt tesztcsík helyes működésének ellenőrzésére időről időre szükség lehet. Cél-szerű ellenőrző mérést végezni, amikor:

- a csíkokat szélsőséges hőmérsékleten, vagy párában tárolta,
- bizonytalan a mérés pontosságában.

Az ellenőrző mérést a normál, vérrel végzett méréshez hasonlóan kell elvégezni. Az egyetlen különbség az, hogy a vérminta helyett az Accu-Chek Instant kontroll-oldatot kell használni.

- Helyezzen be egy tesztcsíkot a készülékbe ütközésig, az elektródákkal előre.
- Az ellenőrző folyadék tubusát alaposan rázza fel használat előtt.
- Amikor a vércsepp animáció megjelenik a kijelzőn, érintse a tesztcsíkot egy csepp ellenőrző folyadékhoz. A legegyszerűbb, ha ehhez a készüléket leteszi az asztalra és a fiola hegyén keletkező kis cseppet a csík elejéhez érinti.
- A készülék automatikusan elvégzi a mérést. Öt másodperc után megjelenik a mérés eredménye.
- Válassza ki a BALRA (◀) és JOBBRA (▶) gombok segítségével, hogy az alacsony (1-es) és a magas (2-es) ellenőrző folyadék közül melyiket használta.
- A csíkidobó segítségével távolítsa el a tesztcsíkot a készülékből, majd a készülék automatikusan kikapcsol.
- Használat után törölje le az ellenőrző folyadék fioláját, ne maradjon rajta nedvesség.

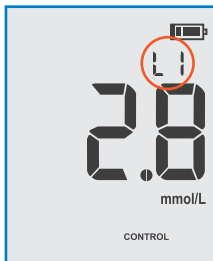

Az ellenőrző mérés eredménye akkor megfelelő, ha az ETALON Teszt tesztcsík címkéjén olvasható elfogadási tartományba esik. Ez azt jelenti, hogy a készülék és a tesztcsík megfelelően működik. A megfelelőség a készülék kijelzőjéről is leolvasható.

Ha a mért érték nem esik a címkén olvasható tartományba, akkor ellenőrizze a következőket:

- A tesztcsík megfelelő körülmények között volt tárolva?
- A tesztcsík tubus kupakja mindig szorosan volt lezárva?
- Az ellenőrző folyadék tubusának hegye megfelelően adagolja a folyadékot?
- Az ellenőrző folyadék szintjének (1 vagy 2) megfelelő tartományt olvasta le?

Amennyiben a felsorolt lehetséges hibaokok egyike sem áll fenn, akkor forduljon szervizünkhöz.

KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék minimális karbantartást igényel átlagos körülmények között. A készülék folyamatosan ellenőrzi a saját állapotát és hiba esetén különböző üzeneteket jelenít meg. Amennyiben ebben a fejezetben nem talál megoldást a felmerült hibára, forduljon szervizünkhöz!

A készülék veszélyes hulladéknak minősül, használatból történő kivonás esetén ne dobja ki a készüléket a kommunális hulladék gyűjtőbe! Adja le veszélyes hulladékgyűjtő helyeken, vagy juttassa el a készüléket szerviz-pontunkba!


Elemcsere

A készülék folyamatosan ellenőrzi az elemek állapotát, melyet a kijelző jobb felső sarkában folyamatosan ki is jelez. A merülő elem szimbólum megjelenése után minél hamarabb ki kell cserélni az elemet.

Az elemek teljes lemerülését az „E-9” hibaüzenet jelzi. Az elemek állapota ekkor már befolyásolná

a mérés pontosságát, ezért a lemerült elem kicseréléséig új mérés nem engedélyezett.

Az elemek cseréjéről részletes tájékoztató a „Műszaki adatok” fejezetben található.

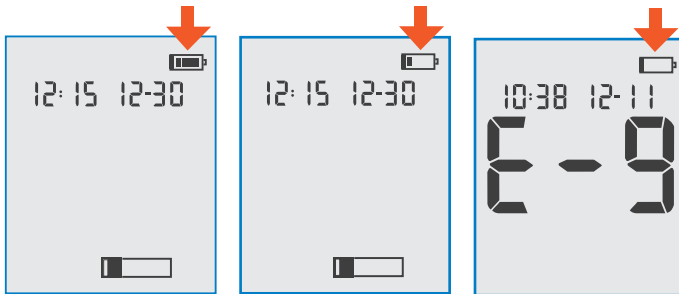

Új elemek behelyezése:

- Kapcsolja ki a készüléket!
- Fordítsa a készüléket a hátoldalára és vegye le az elemtartó fedelét.
- Cserélje ki az elemeket. Ügyeljen arra, hogy az elem negatív pólusa a „-” jelhez, a pozitív pólusa a „+” jelhez kerüljön
- Helyezze vissza az elemfedelelet.



FONTOS!

- A használt elem veszélyes anyagnak számít, körültekintően semmisítse meg. A használt elemeket dobja az erre a célra felállított elemgyűjtő konténerbe.
- Ha a vércukormérőt hosszabb ideig nem használja, az elemeket vegye ki a készülékből.
- Elemcserét követően ellenőrizze készüléke Idő/Dátum beállítását! (lásd „Idő/Dátum” fejezet)



Tisztítás

A készülék tisztítása nem igényel speciális eszközöket. A tisztítás megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. A készülék burkolatát egy nedves, karcmentes törlőkendővel törölje át.

A készüléket ne szedje szét és ügyeljen rá, hogy ne jusson folyadék a belsejébe!

Tárolás

A készülék tartóját úgy alakítottuk ki, hogy a készüléket és a méréshez szükséges eszközöket is biztonságosan tárolja, megóvásukat segítse.





Tartsa a készüléket portól mentes helyen! Óvja a szélsőséges hőmérséklettől és páratartalomtól! Ha leejtette a készüléket, előbb ellenőrizze a megfelelő működőképességet, csak utána végezzen vércukormérést!

Kijelző üzenetek és hibaelhárítás

Kijelző ellenőrzés

Bekapcsoláskor (illetve a KI/BE/OK (ⓘ) gomb hosszú nyomva tartásakor) a készülék automatikusan ellenőrzi a kijelző szegmenseit. Először az összes szegmens felvillan, majd a középső nagy szegmenseken sorban a következő feliratok: 44.4, 33.3, 22.2, 11.1, 77.E.


Ha ettől eltérő képet lát, keresse fel szervizünket!

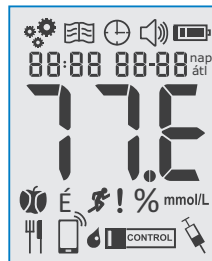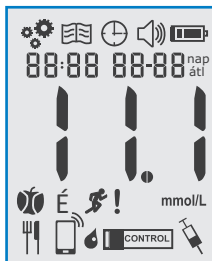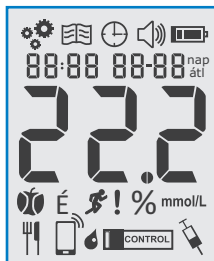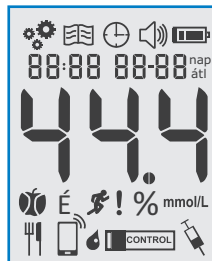

Üres kijelző, a készülék nem kapcsol be Üres kijelző, a készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a tesztcsíkot megfelelően helyezte-e be!
- Az elem teljesen lemerült, cserélje ki. (Lásd „Elemcsere” fejezet!)
Ha a készülék nem kapcsol be és az elem jó, akkor vegye ki az elemet, tartsa lenyomva a KI/BE/OK (ⓘ) gombot kb. 20 másodpercig, majd tegye vissza az elemet! Ha a készülék még mindig nem indul el, forduljon a szervizhez!
- Szélsőséges hőmérséklet. Várjon, amíg a készülék és a tesztcsik magától eléri a környezeti hőmérsékletet.
- Sérült kijelző. Forduljon szervizhez!

Hi és Lo

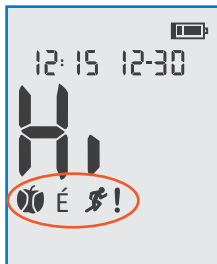

A mért érték túl magas, kívül esik a készülék mérési tartományán, azaz nagyobb, mint 33,3 mmol/l!


Hi = High = magas

A mért érték túl alacsony, kívül esik a készülék mérési tartományán, azaz kisebb, mint 0,6 mmol/l!

Lo = Low = alacsony

Ha a mért vércukoreredmény nem azt tükrözi, ahogyan Ön érzi magát, ismételje meg a mérést. Szükség esetén forduljon a kezelőorvosához!



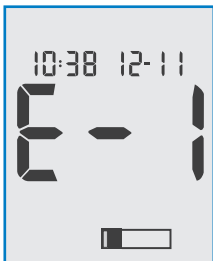

E -1 Hibaüzenet

A tesztcsík már használt, sérült vagy párát kapott! Ismétlje meg a mérést egy új csíkkal!



E -4 Hibaüzenet

Túl kevés vér, vagy ellenőrző folyadék került a tesztcsíkra. Ismétlje meg a mérést nagyobb mintamérettel!

Túl hamar cseppentett, vagy túl kevés a vérminta!

E -3 Hibaüzenet

A tesztcsík sérült. Végezzen ellenőrző mérést kontrolloldattal „A készülék ellenőrzése” fejezetnek megfelelően. Ha az eredmény megfelelő, akkor ismétlje meg a vércukormérést.

Amennyiben továbbra is E-3 üzenet jelenik meg, az Ön vércukorszintje valószínűleg szélsőségesen magas, azonnal forduljon kezelőorvosához!





E -6 Hibaüzenet

Vér, vagy ellenőrző folyadék került a csíkra, mielőtt a villogó csepp szimbólum megjelent volna a kijelzőn!

Ismételje meg a mérést egy új tesztcsíkkal!

E-7 Hibaüzenet

Elektronikus hiba lépett fel mérés közben, vagy a tesztcsíkot kivette és visszahelyezte mérés közben. Kapcsolja ki a készüléket és vegye ki az elemet, tartsa lenyomva a vércukormérő egyik gombját legalább 2 másodpercre, majd helyezze vissza az elemeket!

Ha az üzenet még mindig jelentkezik, keresse fel a szervizt!



E-8 Hibaüzenet

A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas a mérés elvégzéséhez. Keressen megfelelő hőmérsékletű helyszínt és 20-30 perc után ismételje meg a mérést!

Fontos, hogy megvárja amíg a készülék és a tesztcsík magától visszahűl, vagy felmelegszik a környezeti hőmérsékletre.

Ha erőlteti a hőmérsékletváltozást, pontatlan lehet a mérési eredmény.




E-9 Hibaüzenet

Az elemek teljesen lemerültek. Cserélje ki az elemet!

Ha az elemek kicserélése után az üzenet újra megjelenik, ismét vegye ki az elemeket, nyomja meg és tartsa lenyomva a vércukormérő valamelyik gombját legalább 2 másodpercig, majd helyezze vissza az elemeket.

E-10 Hibaüzenet

A dátum és idő beállítások pontatlanok lehetnek. Állítsa be a pontos dátumot, évet és időt!

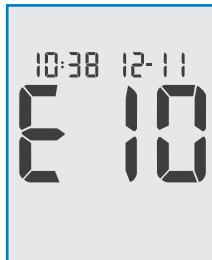

E-11 Hibaüzenet

A tesztcsík megsérülhetett! Ismételje meg a mérést egy új csíkkal!






E -12 Hibaüzenet

Vérmintája magas koncentrációban tartalmazhat C-vitamint.
Forduljon az egészségügyi szakszemélyzethez!

E -13 Hibaüzenet

Folyadék, vagy idegen anyag kerülhetett a tesztsíkra.
Távolítsa el, majd helyezze be újra a tesztsíkot, vagy ismétlje meg a vércukormérést egy új tesztsíkkal. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon szervizünkhöz.

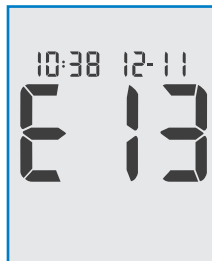

E-14 Hibaüzenet

Elektronikai hiba lépett fel.
Ha az üzenet az elem kivételét és visszahelyezését követően ismételten jelentkezik, keresse fel a szervizt!



A tesztcsík beszorult a csíktartóba

A csíkkidobó gombot mindig teljesen, ütközésig be kell nyomni és a tesztcsík kieséséig nyomva kell tartani a helyes működés érdekében. Részleges lenyomásakor a tesztcsík a kidobás közben megakadhat. Ilyenkor a kidobó gomb ismételt megnyomásával a tesztcsík vagy kiesik a készülékből, vagy törlőkendővel megfogva kihúzható.

A SZETT TARTALMA

- Dcont® NOVUM vércukormérő készülék
- ujjszűrő készülék
- 8 db ujjszűrő lándzsa
- tartótok
- használati útmutatók
- diabétesz napló
- termékregisztrációs kártya és garanciajegy
- USB adatkábel

MŰSZAKI ADATOK

- Mérési elv: bioszenzor
- Vérminta: 0,6 μ l kapilláris teljes vér
- Mérési tartomány: 0,6 – 33,3 mmol/l
- Kijelzés: 0,6 mmol/l alatt: Lo
33,3 mmol/l fölött: Hi
- Mérési idő: 4 másodperc
- Kódolás: kódmentes
- Memória mérete: 720 adat
- Kijelzés: folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Automatikus kikapcsolás: 90 másodperc után
- Interfész: USB interfész
- Elemek: 2 darab 3V-os elem (CR2032)
- Elemek élettartama: 1000 mérés, vagy egy év*
- Működési hőmérséklet: 4 – 45 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 – (+50) °C
- Működési és tárolási páratartalom: 10-90% RH
- Méret: 100 x 58 x 20 mm
- Tömeg: ~ 71g (elemekkel)

















ETALON Teszt testcsík:

- Működési hőmérséklet: 4 – 45 °C
- Tárolási hőmérséklet: 4 – 30 °C
- Működési és tárolási páratartalom: 10-90% RH

*az elemek élettartamát befolyásolhatja a LED fényforrások gyakori használata.

Az optimális élettartam elérése érdekében, a következő elemtípusok használatát javasoljuk: Duracell Long Lasting Power CR2032 Lithium, Energizer CR2032 Lithium

SZIMBÓLUMOK

	In Vitro Diagnosztikai orvostechnikai eszköz
	98/79/EC IVD direktíva, Dcont® NOVUM
	93/42/EEC MDD direktíva, ujjszúró készülék
	93/42/EEC MDD direktíva, ujjszúró lándzsa
	Gyártó
	Olvassa el a használati útmutatót!
	USB adatkommunikáció
	Figyelem!
	Sorozatszám
	Egyenáram
	Tárolási hőmérséklet-tartomány
	Biológiai kockázat!
	Lejáratási idő: ujjszúró lándzsa és tesztcsík esetében
	Gyártási hely tesztcsík, ujjszúró készülék és vércukormérő készülék esetében
	Veszélyes hulladék. Ne dobja ki a készüléket!
	Egyszer használatos eszköz, ujjszúró lándzsa és tesztcsík esetében

HIVATKOZÁSOK

- 1, Dawn M. Bina, Robyn L. Anderson, Mary L. Johnson, Richard M. Bergenstal, David M. Kendall, Clinical Impact of Prandial State, Exercise, and Site Preparation on the Equivalence of Alternative-Site Blood Glucose Testing, Diabetes Care, volume 26, number 4, April 2003
- 2, Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegség antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban
Megjelent: 2017 február 20.
- 3, Dr. Winkler Gábor, Dr. Baranyi Éva: Cukorbetegség kézikönyve, SpringMed Kiadó, 2006
- 4, Beavatkozással nem járó vizsgálat, TUKEB, ENKK engedéllyel. Eng. szám: 076816/2015/OTIG

JÓTÁLLÁS

A készülékre hat év teljes körű garanciát vállalunk. Szervizszolgálatunk ez idő alatt ingyenesen kijavítja a készülék minden meghibásodását, amely rendeltetésszerű használat mellett következett be.

Nem garanciális a javítás abban az esetben, ha szakszerűtlen használatból eredő törés, durva szennyeződés, vagy a készülék rongálása okozta a hibát. Az elemcsere a garanciális idő alatt sem ingyenes.

A hibás készüléket postán vagy személyesen juttassa el címünkre. A kijavított készüléket 3 munkanapon belül visszaküldjük, illetve kiadjuk. Nyitvatartási időn kívül a 77 Elektronika recepcióján karbantartásra, javításra leadott készülék a következő munkanapon 10 órától a szervizben átvehető. A karbantartás, javítás idejére igény esetén cserekészüléket biztosítunk.

Szervizünk a javításon túl is készséggel áll az Ön szolgálatára bármilyen, a készülékkel, illetve annak használatával kapcsolatos kérdésben. Ha bármilyen észrevétele van a készülékkel vagy munkánkkal kapcsolatban, kérjük, azt is juttassa el hozzánk!

Köszönjük bizalmát!

GYÁRTÓ, SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Dcont® SZAKÜZLET és SZERVIZ
77 Elektronika Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 98.

Nyitva tartás:

Hétfő - csütörtök: 7.30-16.30
Péntek: 7.30-14.00

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu

Zöldszám: 06 80 27 77 77

www.dcont.hu www.e77.hu

FELJEGYZÉSEK

FELJEGYZÉSEK



MAGYAR TERMÉK

Dcont®



77 ELEKTRONIKA KFT.
Dcont® SZAKÜZLET és SZERVIZ
1116 Budapest, Fehérvári út 98.
Nyitva tartás:
Hétfő - csütörtök: 7.30-16.30
Péntek: 7.30-14.00

E-mail: ugyfelszolgalat@e77.hu
Zöldsám: 06 80 27 77 77
www.dcont.hu www.e77.hu



A készülékre 6 év teljes körű garanciát vállalunk, mely alatt készülékét évente díjmentesen kalibráljuk.
Szükség esetén cserekészüléket biztosítunk, akár a nap 24 órájában.

IVD

